

# RestQ 手術用椅子

## 取扱説明書

### 1. 製品概要

本品は、手術室内の医師及びスタッフのために設計された椅子で、床との接地面が前傾姿勢の際に安定する構造となっております。  
従来の手術用椅子では難しかった前傾姿勢での手術が可能で、手術時の姿勢を理想的な状態に維持することで医師及びスタッフの疲労を軽減します。  
また、シート持ち手部分を持つと持ち運びに便利です。



### 2. 使用方法

#### ⚠ 注意


シートの高さ調節は、シート下部の昇降レバーを操作することによって行いますので、無菌状態を維持する場合は、手術等を開始する前に高さ調整を行ってください。

#### ① シートの高さを調整します。

本品に軽く座り、お尻を浮かせながら右手で昇降レバーを上を持ち上げると、シートが上がります。体重をかけるとシートが下がります。

#### ② 正面マークを前方にして、床に足の裏をしっかりとつけた状態で座ります。

#### ③ 適切で安定した姿勢を保持しながらご使用ください。

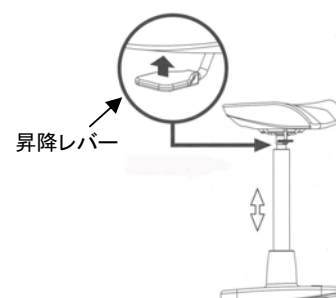

#### 【前傾姿勢】



#### ⚠ 注意

- 必ず足の裏を床面につけ、安定した姿勢でご使用ください。
- 転倒等を防止するため、使用方法をじゅうぶん確認してご使用ください。

### 3. 清掃方法

中性洗剤又は湿らせた布で清拭してください。

### 4. 仕様

シートサイズ：435（幅）×370（奥行）mm

ベースサイズ：355（幅）×360（奥行）mm

シートの高さ：630～880mm

重量：10.2kg

耐荷重：125kg

## 5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
487-007-01	000010	RestQ 手術用椅子

## 6. 保証

### 保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
  - 消耗部品。
  - 故障の原因が本品以外に起因する場合。
  - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 品質保証書

このたびは、RestQ手術用椅子 をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名：RestQ手術用椅子  
ご芳名

ご住所

TEL. ( )

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ( )

お買い上げ日 年 月 日

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546